


取扱説明書

この度は、弊社製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書をかならず
お読みください。また、読まれたあとは大切に保管してください。

各部の名称と製品仕様

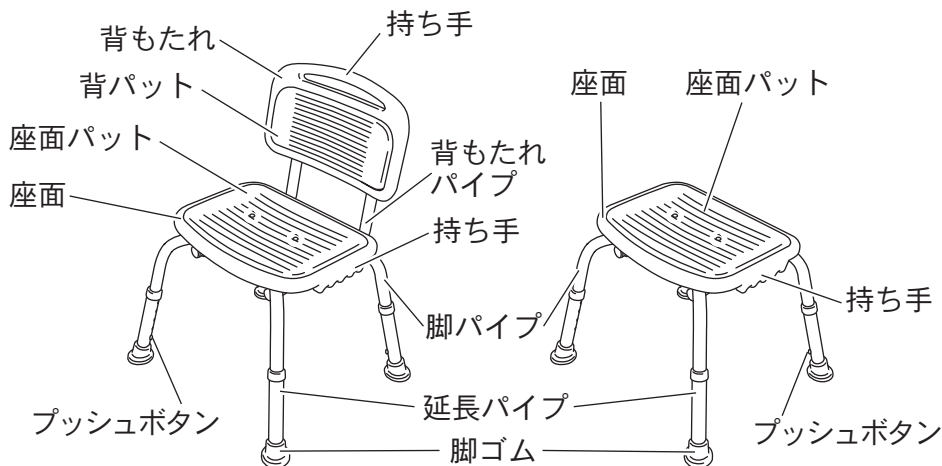

品 名	ティコブシャワーチェア(背付)	ティコブシャワーチェア(背無)
品 番	BSOC01	BSOC02
組み立て寸法	幅510～545×奥行455～490 ×高さ660～760mm	幅510～545×奥行455～490 ×高さ380～480mm
座面寸法	幅395×奥行295mm	幅395×奥行295mm
座面高さ	365～465mm (5ポジション)	365～465mm (5ポジション)
重 量	2.6kg	1.8kg
材 質	本体:アルミ、背・座面:ポリエチレン、パット:EVA、脚ゴム:合成ゴム	
最大使用者体重	100kg	

製品に関して不明な点や不都合なことがございましたら、
ご購入販売店もしくは弊社カスタマーサポートにご連絡ください。

福祉用具総合メーカー

株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時(土・祝日を除く)

0120-508-058

フリーコール フリーコール コーワ オーコーワ

<http://www.tacaof.co.jp>

※製品は改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご使用前の注意

- パイプに変形はないか、脚ゴムにひび割れ・破れ・磨耗による異常はないかなど、各部をかならず点検してください。
- 全てのネジが確実に固定されていること、また全ての延長パイプが同じ高さで確実に固定されていることを確認してください。
- 全ての脚ゴムが確実に取り付けられていることを確認してください。

ご使用上の注意



警告

誤った使い方をする、人が死亡または重傷を負う可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 使用者が自分の身体を十分に安定させられないときは、介助者の方が付き添ってください。
- 本体を踏み台がわりにしたり、座面の上に立ったりしないでください。また、子供を遊ばせるなど他の用途には使用しないでください。
- 最大使用者体重をかならず守ってください。
- 背もたれを支えにして、立ち上がった移動したりしないでください。
- 一人で座るときや立ち上がるとき、座面の片側のみに手をついて支えないでください。(両手で座面左右の持ち手を握ってください。)
- 身体を大きくのけぞって背もたれに体重をかけすぎないでください。



注意

誤った使い方をする、人が傷害を負う可能性や物的損害が発生する可能性があるため、下記の項目をかならず守ってください。

- 入浴動作は身体を確実に安定させ、ゆっくりと行ってください。
- 熱湯をかけないでください。製品本体の変形や、やけどの原因になります。
- パットの耐熱温度は50℃です。それ以上高温のお湯を使用すると変形することがあります。
- 滑りやすい床では使用しないでください。(特にツルツルした小さいタイルが埋め込まれた洗い場では滑りやすく危険です。)



お手入れ方法


- 柔らかい布やスポンジに、うすめた浴室用中性洗剤を含ませて汚れを取ったあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。その後、陰干しあるいは乾いた布で乾拭きしてください。
- タワシや研磨剤入りのスポンジ、磨き粉などは使用しないでください。
- 塩素系洗剤・シンナー・クレゾールなどは絶対に使用しないでください。プラスチックの劣化や破損をまねくことがあります。

組み立て方法


- 1** 以下の付属品を確認してください。(組み立て時にお間違いないようご注意ください。)
- 背無タイプ…ネジ(短)×4本、(黒)×1本の計5本
背付タイプ…ネジ(短)×4本、(黒)×1本、(長)×4本の計9本

- 2** 座面を裏返し、X型の溝に脚パイプを交差させてセットしてください。
(座面裏の番号と脚の番号シールを合わせてください。)

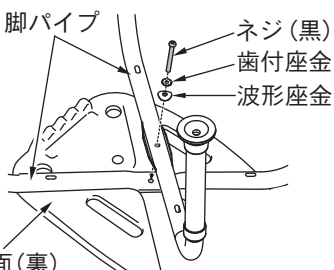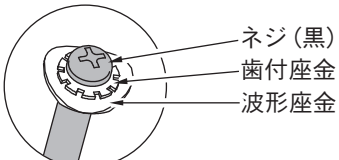- 3**
- 
- ネジ(黒)に歯付座金と波形座金をセットし、座面中央部を仮留めしてください。
- 

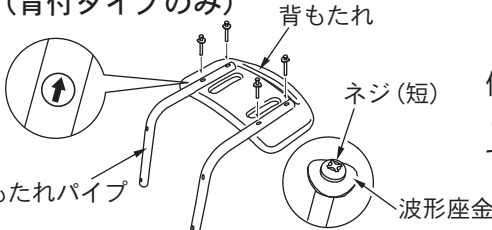
- 4** (背付タイプのみ)
- 
- 2本の背もたれパイプの①シール側を背もたれ側にして、ネジ(短)4本に波形座金をセットしたもので仮留めしてください。

- 5** ■背無タイプ

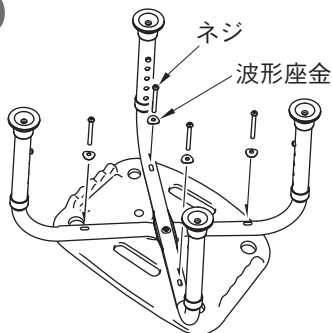

残りの4ヶ所を、ネジに波形座金をセットしたもので仮留めし、最後に全てのネジを強く締め、固定してください。


- 背付タイプ

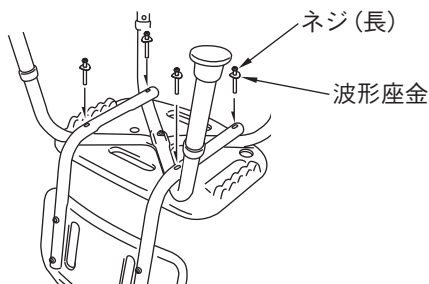

背もたれパイプと、座面裏の脚パイプのネジ穴を合わせ、(座面裏に番号のある方が前方です。背もたれは後方にくるようにしてください。)ネジ(長)4本に波形座金をセットしたもので仮留めしてください。最後に全てのネジを強く締め、固定してください。

ご使用方法

■座面高さの調節方法

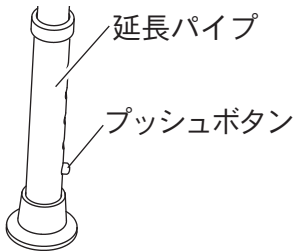

各脚部にあるプッシュボタンを押しながら延長パイプを上下させ、調節穴からプッシュボタンが確実に出たことを確認してください。座面高さは5段階に調節できます。


最適な座面高さは、膝の関節が直角に曲がり足の裏がきちんと床に付いた状態です。

⚠注意

- 各延長パイプのプッシュボタンが確実に出ていることを確認してください。
- 延長パイプが全て同じ高さで、確実に固定されていることをかならず確認してください。

■パットの付け方・はずし方

背もたれ、座面のパットは、それぞれ裏側の穴からパットを押し出すようにしてはずしてください。前側からひっぱると、パットの突起がはがれることがあります。付けるときは、パットの突起を、背もたれ、座面それぞれの穴に差し込んでください。

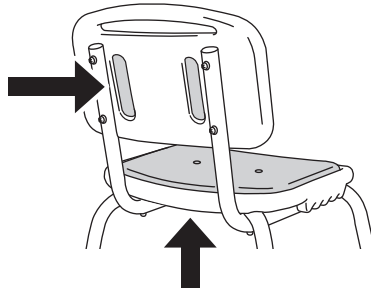

■持ち手の使用方法

座面裏の左右には、握りやすい形状の持ち手がついています。座っている時に使用者の身体を安定させるために使用してください。

背付タイプの背もたれにある持ち手は、持ち運びの際に使用してください。